

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE: The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS: The Procare MaxTrax Walker is designed to provide support and immobilization to the lower leg, ankle and foot. It may be used for the treatment of stress fractures of the lower limb, stable ankle and/or foot fractures, acute lateral ankle sprains and Achilles tendon repair. Providing immobilization or controlled movement of the limb or bony segment.

CONTRAINdications: This device is contraindicated for unstable fractures of the lower leg, ankle and foot.

PRESCRIBING INFORMATION: Note: Due to the molded outer sole, the orthopedic shoe must be slightly higher than a normal street shoe; therefore an athletic shoe or a street shoe with a 1/2" heel, may be worn if necessary for patient comfort. A heel lift also may be used in the shoe worn on the non-injured foot.

INFORMATION & PRESCRIPTIONS: Note: Due to the molded outer sole, the orthopedic shoe must be slightly higher than a normal street shoe; therefore an athletic shoe or a street shoe with a 1/2" heel, may be worn if necessary for patient comfort. A heel lift also may be used in the shoe worn on the non-injured foot.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Este dispositivo debe utilizarse bajo la supervisión de un profesional médico. La decisión de aplicar el dispositivo en cada caso concreto, así como la frecuencia y la duración del uso, corresponde exclusivamente al médico tratante. Consulte siempre a su médico antes de efectuar modificaciones al dispositivo.
- La aplicación de este dispositivo se recomienda cuando se pueda demostrar que la fractura es estable y existan límites aceptables de deformación angular y de rotación.
- La aplicación de este dispositivo es recomendada only when the fracture is demonstrably stable and there area acceptable limits of angular and rotational deformity.
- Do not use this device on patient's incapable of communicating physical discomfort.
- Check your skin frequently for "hot spots" and skin irritation.
- Do not use this device if you cannot feel sensations whether due to post-op anaesthesia, nerve, skin or other conditions.
- Use caution when walking on slippery or wet surfaces to avoid injury.
- Do not use over open wounds.
- Si tiene una reacción alérgica o experimenta picazón o dolor después de usar este dispositivo, deje de usarlo y pongase en contacto con su médico.
- Do not use this device or use the device other than intended.
- If you develop an allergic reaction and/or experience itch, red skin after coming into contact with any part of this device, please stop using it and contact your healthcare professional immediately.
- Do not use this device if it is damaged and/or the packaging has been opened.
- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, consult your medical professional immediately.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to use of this device.

INFORMATION DE COLOCACIÓN: Para su colocación por vez primera, afloje las correas.

1. Se proporcionan dos almohadillas de quita y pon de espuma para el tobillo para la comodidad del paciente.

APPLICATION INFORMATION: For first time application, loosen all straps 1. Untie the strap under the liner.

2. Untie the strap under the liner pads are provided for patient comfort.

3. Place the liner in the boot. At cutouts, fold side panels of liner and separate. Smaller pad should be placed in liner first. At cutouts, fold side panels of liner and secure it either side of liner. For a snug fit around ankle area when applying correctly. Large pad may be applied directly to liner or layered on top of small pad as needed. Application is same as small pad. (Fig. 1)

3. Place foot in liner and secure with contact closure. Make sure the heel goes snugly into the posterior portion of the liner. Secure the footrest with the anterior portion of the liner. Fija la lengüeta delantera al pie, al final del pie.

4. Ambas barras verticales pueden ser acortadas 2" para acomodar a pacientes de talla menor. (Fig. 2)

4. Both uprights may be shortened by 2" to accommodate various patient heights. To Breakdown Uprights: Secure uprights on edge of table.

5. Remove the straps from the liner.

6. The two straps at the ankle joint may be adapted to accommodate different leg lengths. (Fig. 5)

6. Las correas de la unión del tobillo pueden ser adaptadas para acomodar las necesidades individuales del paciente. Antes de fijar las correas, determine el método de amarrar del tobillo deseado. Conversión de Amarras Cruzados: Si es deseado el método de amarras cruzados, la correa debe ser ajustada y fija en la parte superior del tobillo.

7. The strap is cinched onto the heel.

8. The strap is cinched onto the heel.

9. The strap is cinched onto the heel.

10. The strap is cinched onto the heel.

11. The strap is cinched onto the heel.

12. The strap is cinched onto the heel.

13. The strap is cinched onto the heel.

14. The strap is cinched onto the heel.

15. The strap is cinched onto the heel.

16. The strap is cinched onto the heel.

17. The strap is cinched onto the heel.

18. The strap is cinched onto the heel.

19. The strap is cinched onto the heel.

20. The strap is cinched onto the heel.

21. The strap is cinched onto the heel.

22. The strap is cinched onto the heel.

23. The strap is cinched onto the heel.

24. The strap is cinched onto the heel.

25. The strap is cinched onto the heel.

26. The strap is cinched onto the heel.

27. The strap is cinched onto the heel.

28. The strap is cinched onto the heel.

29. The strap is cinched onto the heel.

30. The strap is cinched onto the heel.

31. The strap is cinched onto the heel.

32. The strap is cinched onto the heel.

33. The strap is cinched onto the heel.

34. The strap is cinched onto the heel.

35. The strap is cinched onto the heel.

36. The strap is cinched onto the heel.

37. The strap is cinched onto the heel.

38. The strap is cinched onto the heel.

39. The strap is cinched onto the heel.

40. The strap is cinched onto the heel.

41. The strap is cinched onto the heel.

42. The strap is cinched onto the heel.

43. The strap is cinched onto the heel.

44. The strap is cinched onto the heel.

45. The strap is cinched onto the heel.

46. The strap is cinched onto the heel.

47. The strap is cinched onto the heel.

48. The strap is cinched onto the heel.

49. The strap is cinched onto the heel.

50. The strap is cinched onto the heel.

51. The strap is cinched onto the heel.

52. The strap is cinched onto the heel.

53. The strap is cinched onto the heel.

54. The strap is cinched onto the heel.

55. The strap is cinched onto the heel.

56. The strap is cinched onto the heel.

57. The strap is cinched onto the heel.

58. The strap is cinched onto the heel.

59. The strap is cinched onto the heel.

60. The strap is cinched onto the heel.

61. The strap is cinched onto the heel.

62. The strap is cinched onto the heel.

63. The strap is cinched onto the heel.

64. The strap is cinched onto the heel.

65. The strap is cinched onto the heel.

66. The strap is cinched onto the heel.

67. The strap is cinched onto the heel.

68. The strap is cinched onto the heel.

69. The strap is cinched onto the heel.

70. The strap is cinched onto the heel.

71. The strap is cinched onto the heel.

72. The strap is cinched onto the heel.

73. The strap is cinched onto the heel.

74. The strap is cinched onto the heel.

75. The strap is cinched onto the heel.

76. The strap is cinched onto the heel.

77. The strap is cinched onto the heel.

78. The strap is cinched onto the heel.

79. The strap is cinched onto the heel.

80. The strap is cinched onto the heel.

81. The strap is cinched onto the heel.

82. The strap is cinched onto the heel.

83. The strap is cinched onto the heel.

84. The strap is cinched onto the heel.

85. The strap is cinched onto the heel.

86. The strap is cinched onto the heel.

87. The strap is cinched onto the heel.

88. The strap is cinched onto the heel.

89. The strap is cinched onto the heel.

90. The strap is cinched onto the heel.

91. The strap is cinched onto the heel.

92. The strap is cinched onto the heel.

93. The strap is cinched onto the heel.

94. The strap is cinched onto the heel.

95. The strap is cinched onto the heel.

96. The strap is cinched onto the heel.

97. The strap is cinched onto the heel.

98. The strap is cinched onto the heel.

99. The strap is cinched onto the heel.

100. The strap is cinched onto the heel.

101. The strap is cinched onto the heel.

102. The strap is cinched onto the heel.

103. The strap is cinched onto the heel.

104. The strap is cinched onto the heel.

105. The strap is cinched onto the heel.

106. The strap is cinched onto the heel.

107. The strap is cinched onto the heel.

108. The strap is cinched onto the heel.

109. The strap is cinched onto the heel.

110. The strap is cinched onto the heel.

111. The strap is cinched onto the heel.

112. The strap is cinched onto the heel.

113. The strap is cinched onto the heel.

114. The strap is cinched onto the heel.

115. The strap is cinched onto the heel.

116. The strap is cinched onto the heel.

117. The strap is cinched onto the heel.

118. The strap is cinched onto the heel.

119. The strap is cinched onto the heel.

120. The strap is cinched onto the heel.

121. The strap is cinched onto the heel.







122. The strap is cinched onto the heel.

123. The strap is cinched onto the heel.

124. The strap is cinched onto the heel.








125. The strap is cinched onto the heel.

126. The strap is cinched onto the heel.

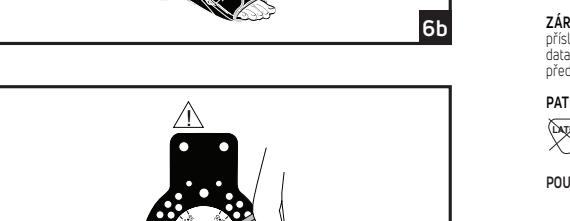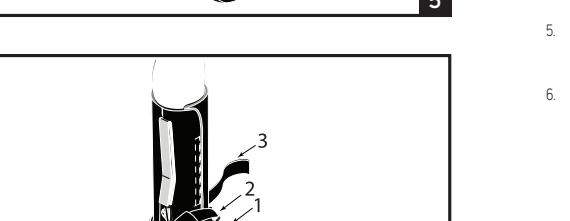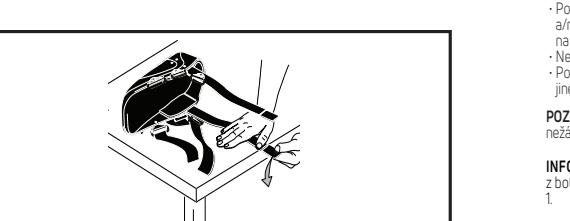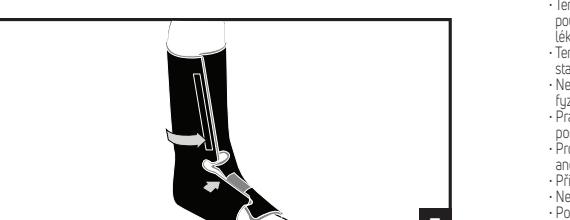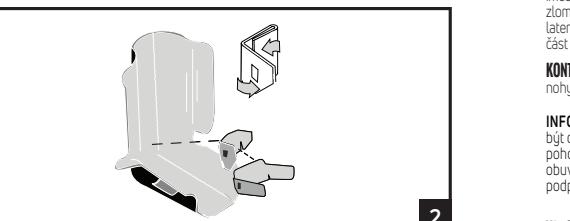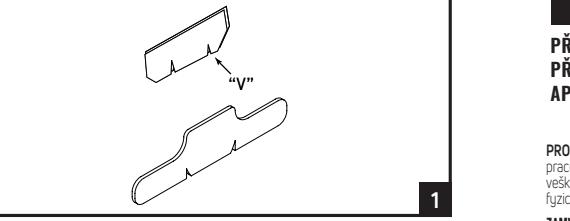







ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČÍTE TEŠERÉ NÁSLEDUJÚCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRAWNÝM FUNKCI NÁSTROJE.

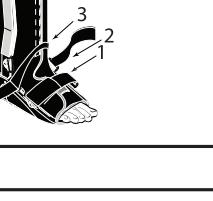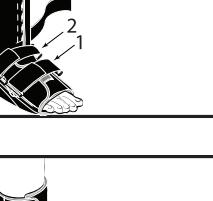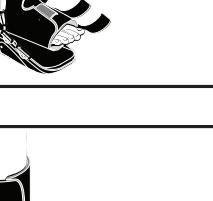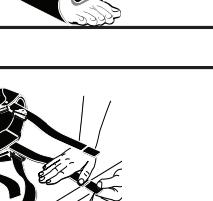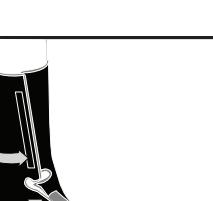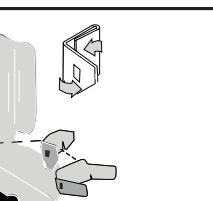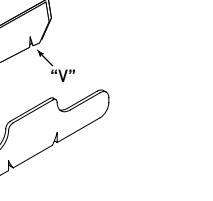







SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCIE INSTRUKCIE. SPRÁVNÁ POUŽITIE APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRAWNÉMU FUNKCI NÁSTROJE.

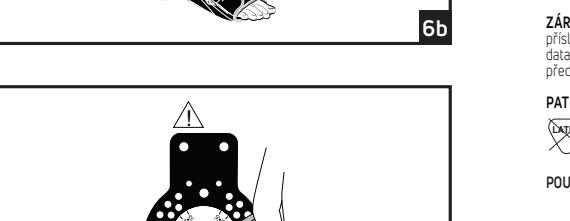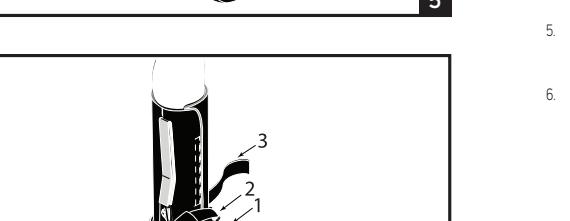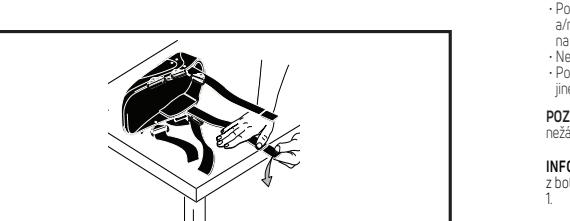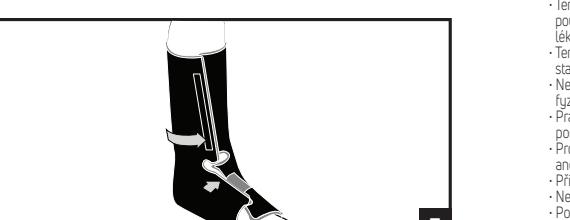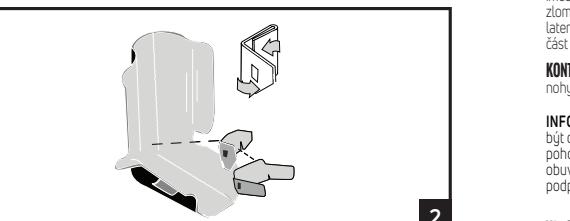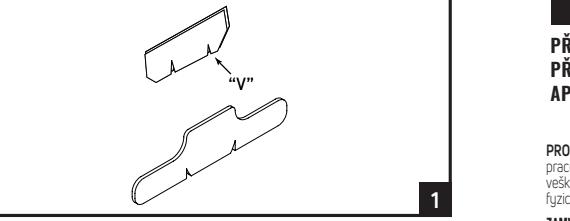







DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

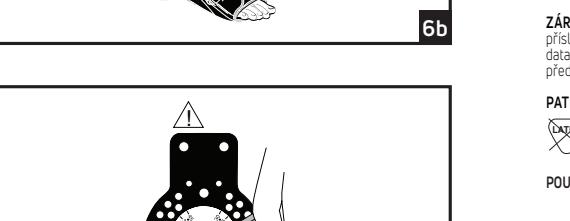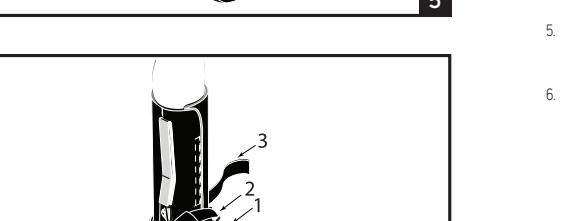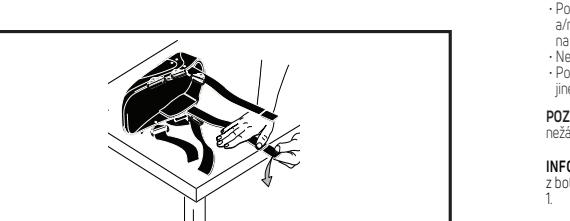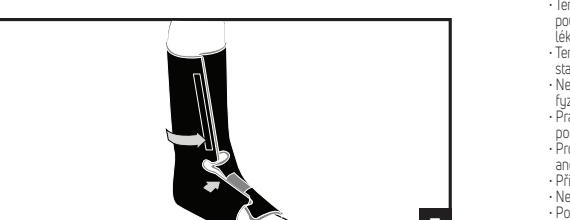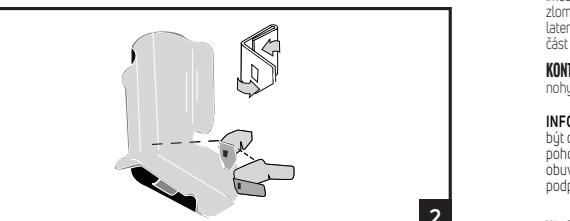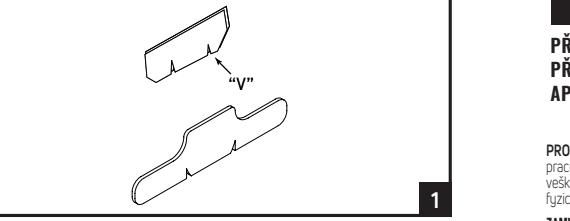






SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR ATT PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

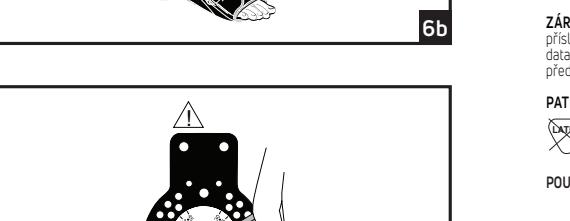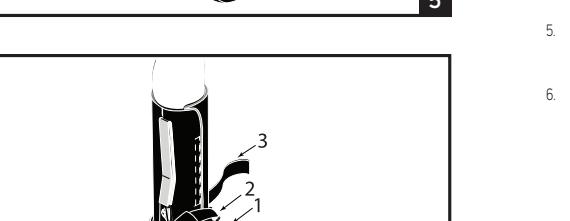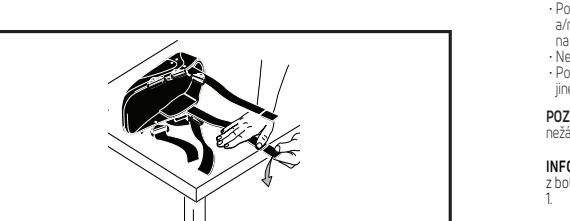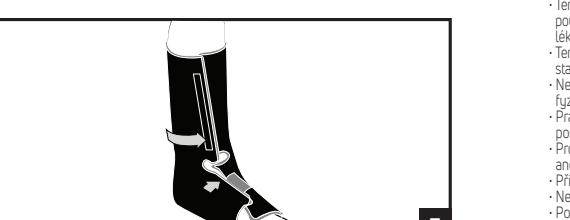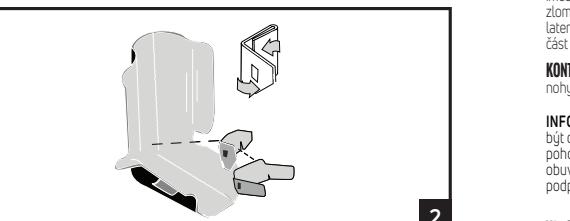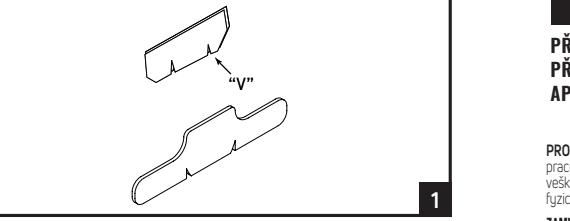






SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTÄTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN TÄRKEÄÄ LÄITTEEN ASIANMUUKAISESEN TOIMINNAN KANHALTA.

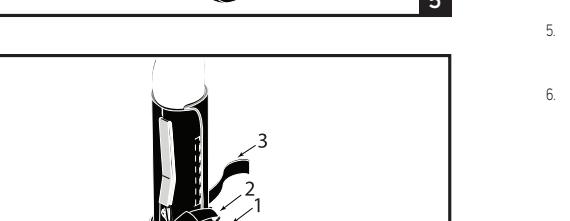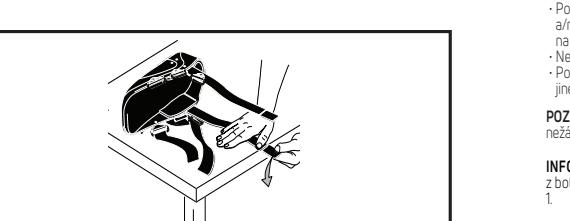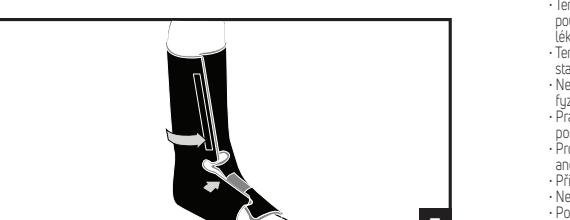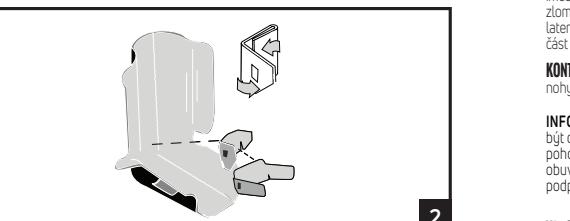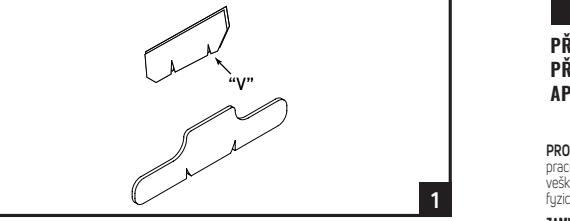






NORSK

FOR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NYQE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

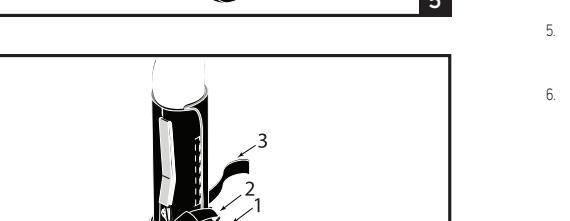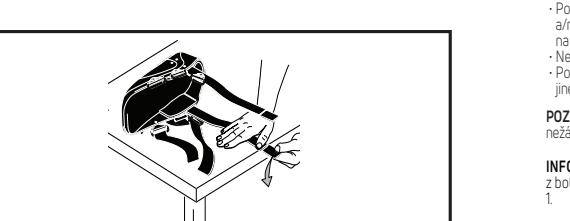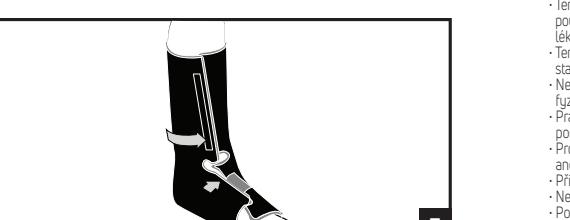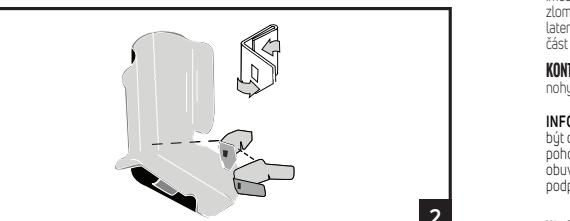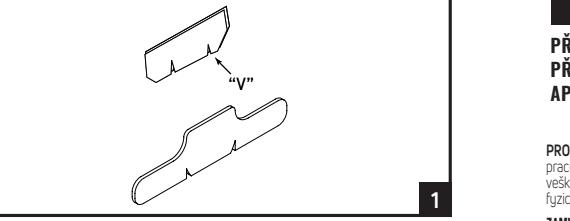






简体中文

使用本器械之前, 请仔细通读以下使用说明。正确使用本器械对发挥其真正功能十分重要。

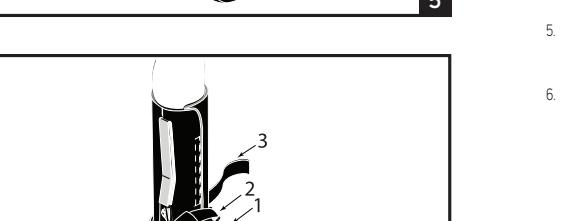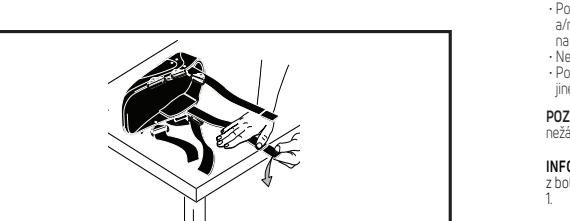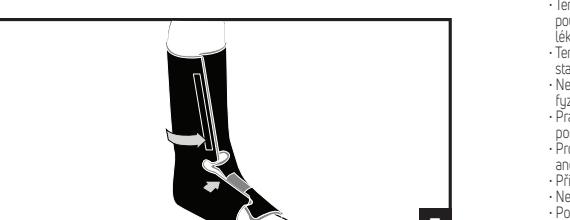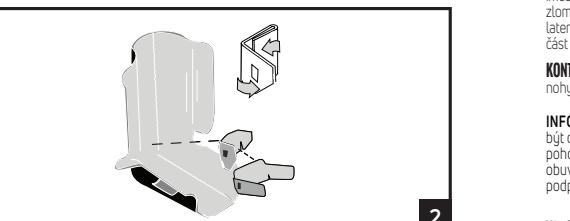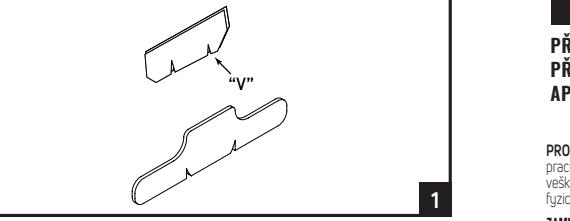






日本語

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお読みください。本製品が適正に機能するためには正しい使用法が不可欠です。

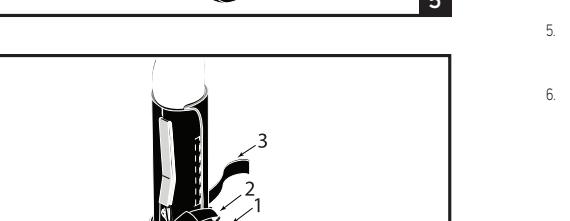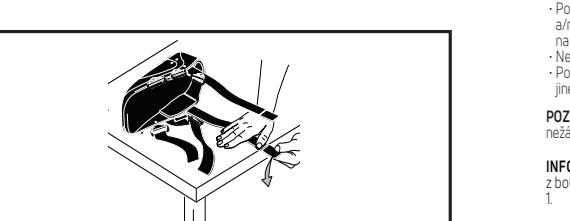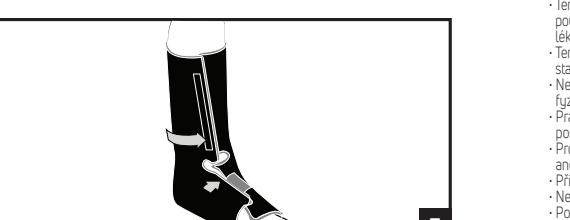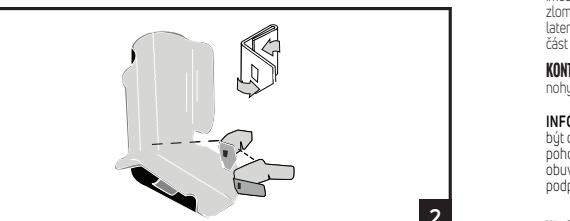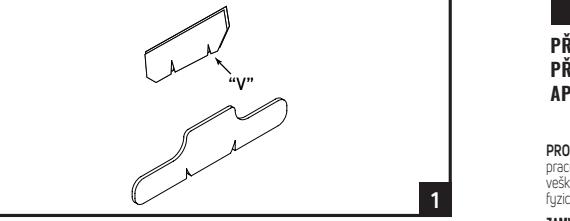






ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČÍTE TEŠERÉ NÁSLEDUJÚCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRAWNÝM FUNKCI NÁSTROJE.

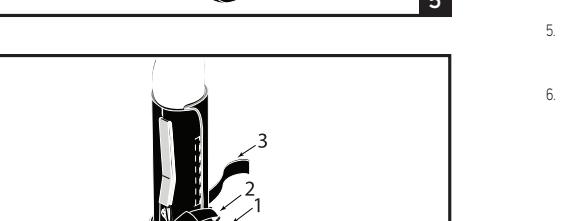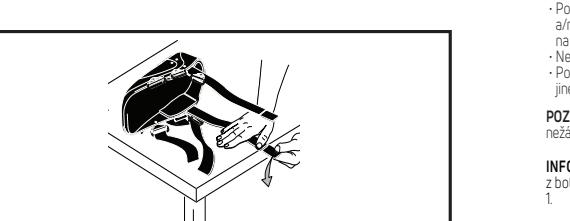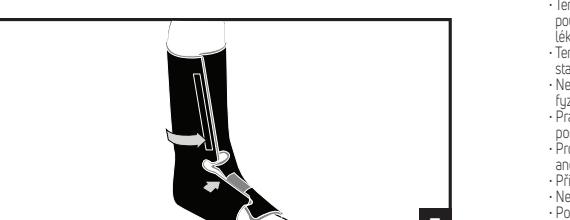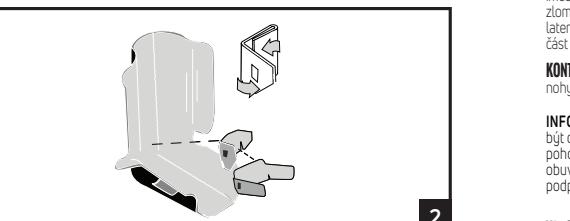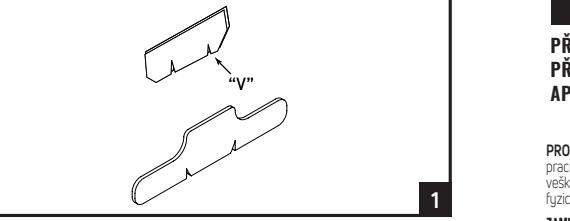






SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCIE INSTRUKCIE. SPRÁVNÁ POUŽITIE APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRAWNÉMU FUNKCI NÁSTROJE.

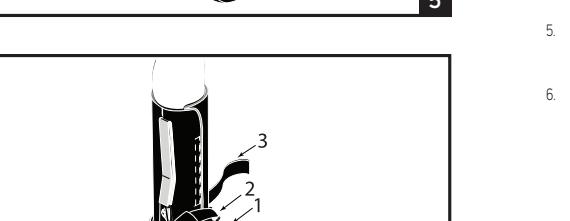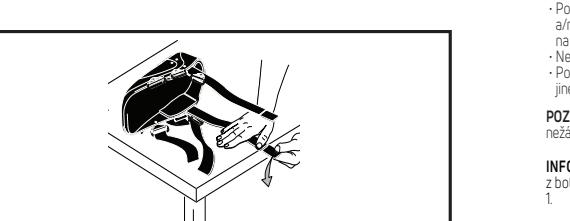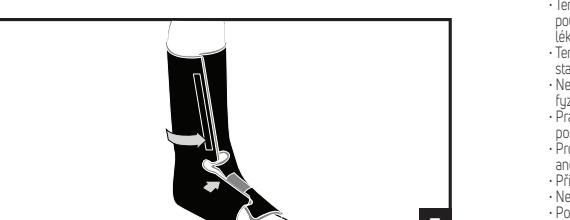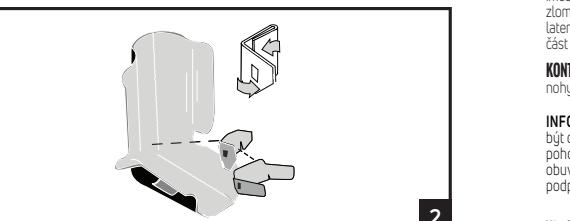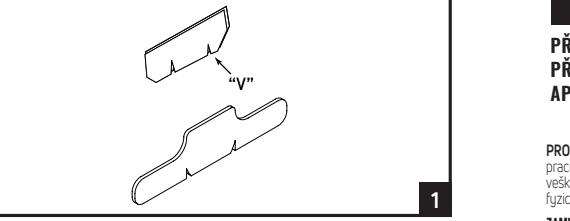






DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

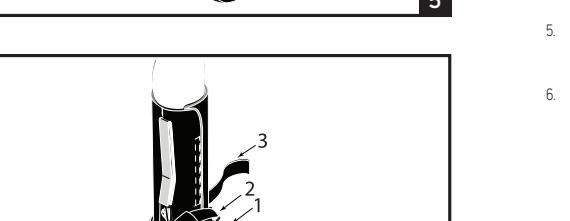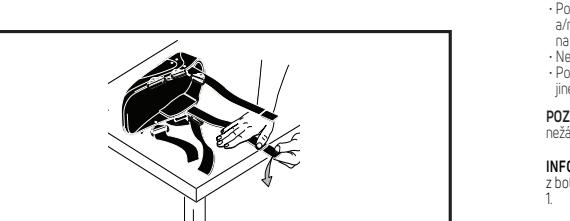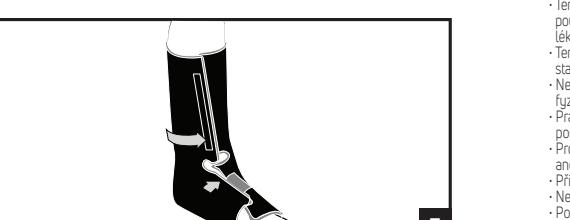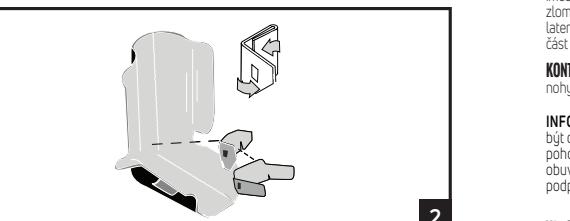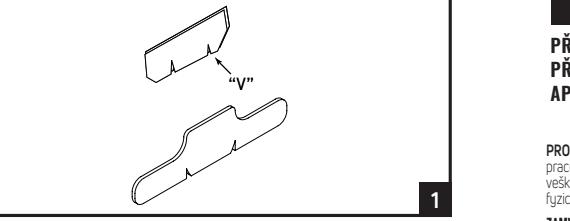






SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR ATT PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

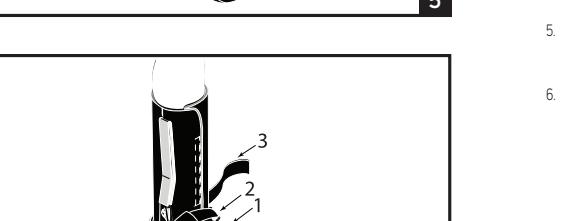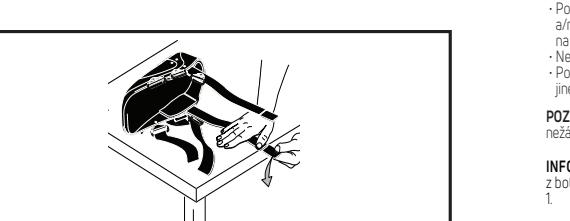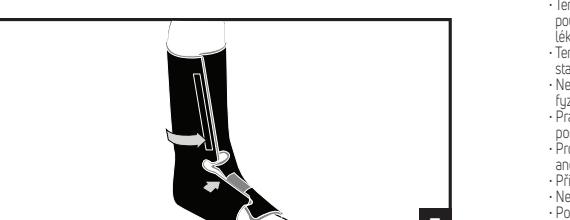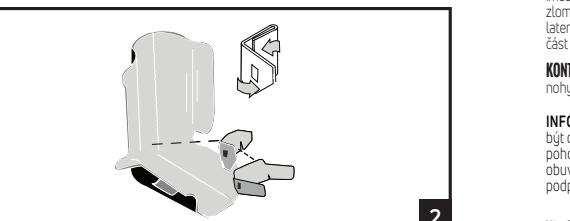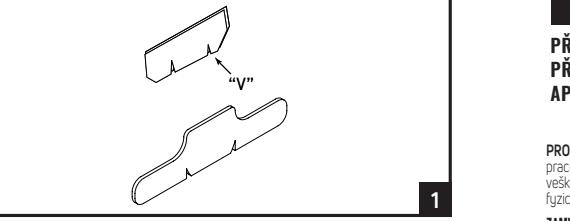






SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTÄTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN TÄRKEÄÄ LÄITTEEN ASIANMUUKAISESEN TOIMINNAN KANHALTA.

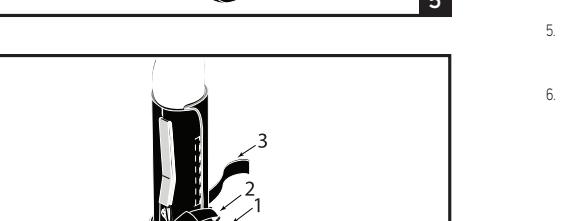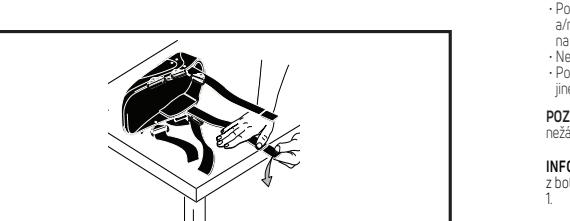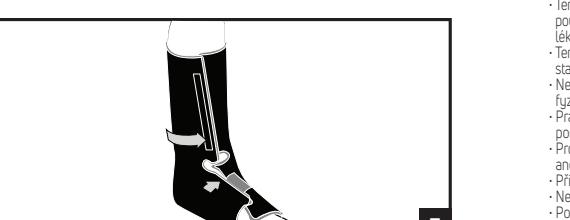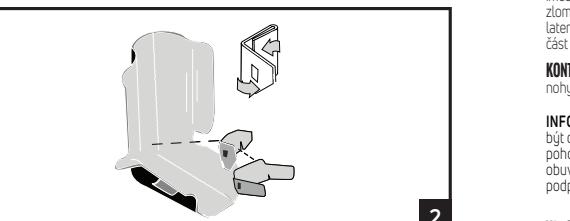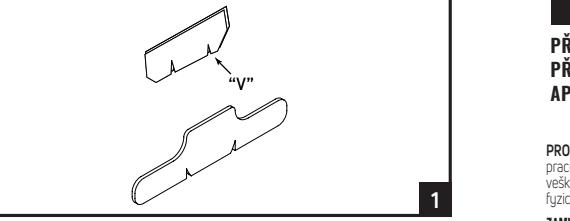

NORSK

FOR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NYQE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

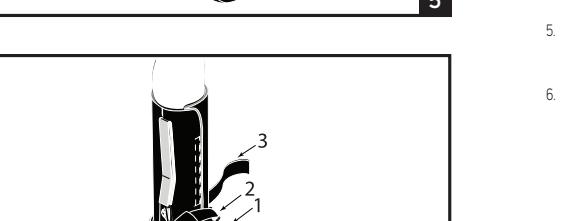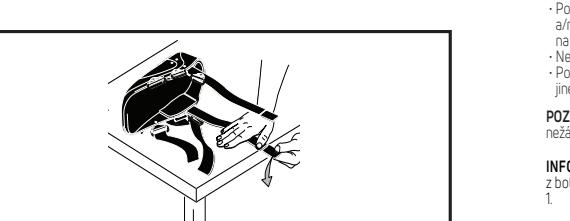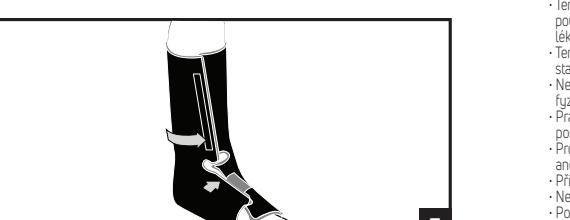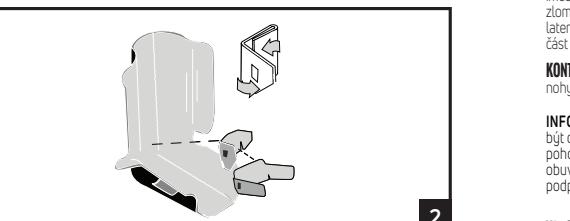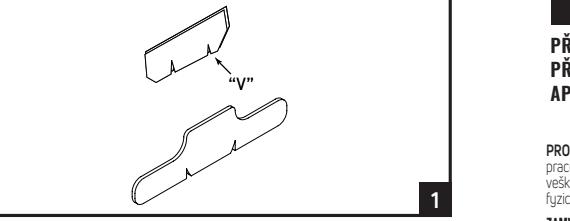

简体中文

使用本器械之前, 请仔细通读以下使用说明。正确使用本器械对发挥其真正功能十分重要。

